

FRED EASYPORT PLUS

Compact et puissant, le défibrillateur utilisable par tous, partout et à tout moment




SCHILLER
The Art of Saving Lives

FRED EASYPORT PLUS

Le compagnon idéal pour les déplacements

Le défibrillateur de poche
SCHILLER, le
FRED easyport plus:

- ✧ 780 grammes uniquement,
46 x 150 x 143 mm (h x l x p)
- ✧ Disponible en version AED
First, Auto ou Manuel
- ✧ Options de retour
d'information sur la RCP

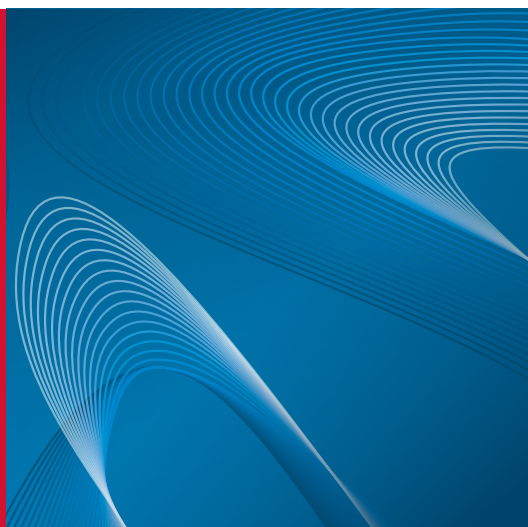

FACILE À TRANSPORTER

Le FRED easyport plus ne pèse que 780 grammes, il combine petite taille et fonctionnalités avancées.

Il est livré avec un sac de transport standard ou un petit sac de transport, en fonction des accessoires qui doivent être emballés avec le défibrillateur.

UN CHOC DÈS QUE NÉCESSAIRE

FRED easyport plus dispose d'un système d'analyse rapide et charge systématiquement l'énergie requise de sorte que le choc puisse être délivré dès que l'appareil le recommande.

FEED-BACK RCP

La défibrillation seule n'est pas suffisante. Afin de maintenir une bonne alimentation des organes en oxygène, la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est indispensable pour restaurer un flux sanguin correct.

FRED easyport plus vous aide à renforcer l'efficacité des compressions thoraciques:

- ✧ En donnant des indications sur la profondeur, la fréquence et le relâchement
- ✧ En établissant un rythme régulier grâce au métronome

Lors de l'utilisation du capteur ARGUS LifePoint, le secouriste reçoit une assistance sonore et visuelle par l'intermédiaire d'un code-couleur affiché sur l'écran pendant les compressions thoraciques.

CONCEPT DE BATTERIE ADAPTABLE

Il peut fonctionner avec une batterie rechargeable ou une pile jetable. Le chargeur externe peut charger deux batteries simultanément.



SUIVI DES INFORMATIONS

FRED easyport plus enregistre les données d'intervention, ce qui permet aux médecins et urgentistes d'avoir une meilleure visibilité de l'état du patient.

- ❖ Qualité des RCP
- ❖ Courbe ECG
- ❖ Courbe d'impédance
- ❖ Événements

RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS

Grâce aux fonctionnalités Wi-Fi et USB, les fichiers sauvegardés peuvent être facilement consultés et gérés par la solution de gestion de données SEMA de SCHILLER.

PROCUREZ-VOUS L'APPAREIL QUI VOUS CONVIENT

FRED easyport plus est proposé en trois versions, adaptées aux différents niveaux d'utilisation.



DAE FIRST

Le FRED easyport plus, DAE semi-automatique de couleur gris nécessite la confirmation du secouriste pour délivrer un choc.

Une courbe ECG peut être affichée sur le grand écran LCD couleur.



DAE AUTO

La version entièrement automatique du FRED easyport plus ne demande aucune action de la part du secouriste. Après analyse du rythme cardiaque, l'appareil détermine si un choc est nécessaire. Si c'est le cas, le choc est automatiquement délivré.

Une courbe ECG peut être affichée sur le grand écran LCD couleur.



DAE MANUAL

Se distingue par sa couleur rouge, le FRED easyport plus mode manuel permet aux médecins et professionnels paramédicaux de délivrer un choc manuellement. Grâce à l'affichage de l'ECG, les professionnels de santé peuvent déterminer si un choc est nécessaire.



SCHILLER
FRED easyport plus

PLUG AND APPLY ELECTRODES

00:00:04

2

3



ELECTRODES
FRED PA-1,
for ARRIUS Pro Life Case 1,
Type 2, CARDIOVIT AT-101, easy



PETIT ET PUISSANT

Le FRED easyport plus ne pèse que 780 grammes et délivre des chocs jusqu'à 200 joules. La technologie Multipulse Biowave® assure des chocs de défibrillation efficaces et sûrs, tout en réduisant à un minimum les dommages au myocarde.

GAGNEZ DE PRÉCIEUSES SECONDES

Avec les électrodes de défibrillation pré-connectées, l'analyse de la fréquence cardiaque démarre immédiatement afin de réduire le délai de délivrance du choc.

MODE DE SIGNAL ECG

Le mode de signal ECG à 2 dérivations est utilisé lorsque la défibrillation n'est pas indiquée mais que le rythme cardiaque du patient doit être observé par le personnel médical.

TOUJOURS PRÊT

Le FRED easyport plus effectue des tests automatiques réguliers pour contrôler son bon fonctionnement. Son statut est indiqué par le bouton marche/arrêt clignotant.

TRANSMISSION DE DONNÉES À SEMA

Les données d'intervention peuvent être envoyées par Wi-Fi ou USB pour être examinées par les professionnels de santé.

CONÇU POUR DURER

Avec la classification IP44, FRED easyport plus résiste aux éclaboussures d'eau.





DÉFIBRILLATEUR FORMAT POCHE

Le FRED easyport plus mesure seulement 150 x 143 millimètres – cette photo correspond à la taille réelle (1/1)!

ADAPTÉ À TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Le FRED easyport plus possède un grand écran LCD couleur qui ajuste automatiquement la luminosité afin de voir les indications d'un seul coup d'œil.

MODE PÉDIATRIQUE INTUITIF

En utilisant les mêmes électrodes, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour changer le mode patient.

AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

Le métronome intégré définit le rythme correct et guide le secouriste pendant l'intervention.

Par ailleurs, le capteur ARGUS LifePoint guide le secouriste avec des signaux sonores et visuels à l'écran pour pratiquer des compressions thoraciques efficaces.

INTERFACE UTILISATEUR OPTIMISÉE

Trois étapes simples avec illustrations et instructions sonores pour une parfaite compréhension.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les caractéristiques présentées, ou d'interrompre le produit décrit à tout moment sans préavis ni obligation. Les images peuvent être représentatives. Certains produits peuvent ne pas être autorisés par voie réglementaire ou mis en vente sur tous les marchés. Contactez votre représentant SCHILLER pour les informations les plus récentes et la disponibilité.



SCHILLER
 The Art of Saving Lives